


# 球囊料管

脉通智造™为了制造更高质量的球囊管，必须使用出色的球囊管材作为基础。脉通智造™的球囊管材由高纯度材料通过特殊工艺挤压而成，可保持精确的外径和内径公差，并控制机械性能（如延伸率）以提高质量。此外，脉通智造™的工程团队还能加工球囊管，从而确保设计出适当的球囊管材规格和工艺，以满足用户最终的要求。

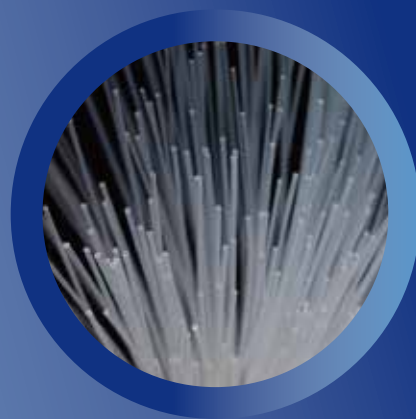

## 核心优势

- 尺寸精度高
- 延伸率极差小，拉伸强度高
- 内外直径同心度高
- 球囊壁厚，爆破强度和疲劳强度高

## 应用领域

球囊管因其独特的性能成为导管的关键部件。目前，它已广泛应用于血管成形术、瓣膜成形术和其他球囊导管应用中。

技术指标	单位	参考值
外径	mm (inch)	$\geq 0.254$ (0.01)
内外径公差	mm (inch)	最小 $\pm 0.0127$ (0.0005)
同心度	%	$\geq 95$
内外层材料		Pebax PA PET TPU等多种材料可供选择，所有的树脂等级均为SA MED
爆破强度	atm	最大可达30atm
疲劳强度		16atm下10个循环，管材无破裂、无损伤

## 质量管理

脉通智造执行严格的ISO13485质量管理体系，打造规范的万级净化车间，确保产品符合医疗器械的生物学要求。同时，配以先进的制造设备和精密的测量仪器，以及严格的检验检测方法，确保产品品质满足高端医疗器械的使用要求。

## 订货信息

我们的专家可以在材料选择、管材规格和定制切割长度方面为您提供指导，以满足您对产品的特定需求。请扫描右侧二维码，添加客服小脉以订购样品。

